

Remote Microphone +

GEBRUIKSAANWIJZING



Overzicht	2
Basisfuncties	6
Dagelijks gebruik	8
Het dragen van de Remote Mic +	10
Koppelen met hoortoestellen	11
Koppelen met Bluetooth apparaten	13
Gebruik van de knop voor ingangsmodus.	14
Externe microphone	14
Bluetooth telefoon en audio	15
Ringleiding	17
FM systeem	17
Lijningang (line-in)	17
Audio-streaming starten/stoppen	20
Stroomadapter in elkaar zetten.	21
Problemen oplossen	22
Veiligheidsinstructies.	26
Wettelijke aanwijzingen.	30

Starkey Hearing Technologies Remote Microphone+ is ontwikkeld om het geluid van verschillende elektronische geluidsbronnen direct naar uw 2,4 GHz draadloze hoortoestellen te streamen.

In een rumoerige omgeving kan de Remote Mic + door een verre spreker worden gedragen zodat het accessoire als luisterhulp fungeert. De Remote Mic + werkt ook met de volgende geluidsbronnen:

- Bluetooth A2DP profiel (bijvoorbeeld muziek)
- Bluetooth Handsfree profiel (telefoongesprekken)
- Ringleidingen
- FM systemen
- Line-in audio


Streaming – Audio of geluid wordt draadloos vanaf de Remote Mic + naar uw hoortoestellen overgedragen.

Inhoud van de verpakking

- Remote Mic +
- Stroomadapter
- USB-naar-microUSB kabel
- Gebruiksaanwijzing

Optionele accessoires

- Europin FM receiver
- Line-in kabel (artikel #91259-000)
- Veiligheidskoord (artikel #91324-000)

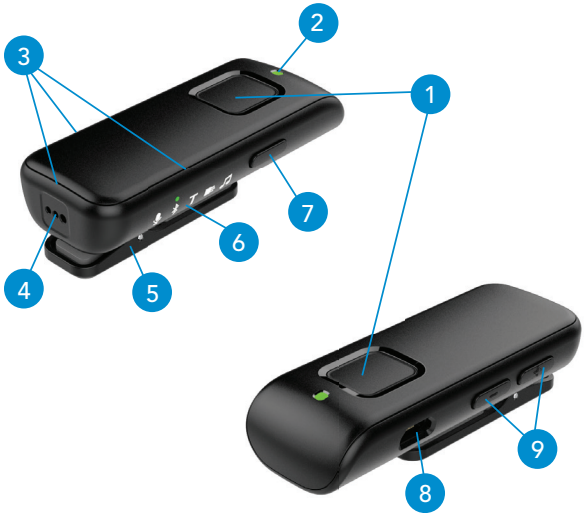

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Multifunctionele knop | 6. LED's ingangsmodus |
| 2. Status-LED | 7. Knop ingangsmodus |
| 3. Microfoons | 8. Aansluiting microUSB |
| 4. Aansluiting FM receiver | 9. Volumeknoppen |
| 5. Clip | |

Overzicht

1. Multifunctionele knop

- Bediening van de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone +

2. Status-LED

- Weergave van de status van de Remote Mic +

LED	STATUS APPARAAT
Uit	Apparaat is uitgeschakeld
Pulseert langzaam groen	Apparaat is ingeschakeld, maar er is geen Bluetooth verbinding actief
Pulseert langzaam blauw	Apparaat is ingeschakeld en er is een Bluetooth verbinding actief
Pulseert langzaam rood	Batterij bijna leeg
Constant rood	Mogelijk is er een fout opgetreden

3. Microfoons

- Vangt de stem van een spreker op tijdens het gebruik als externe microfoon
- Vangt uw stem op tijdens telefoongesprekken via Bluetooth

4. Aansluiting FM receiver

- Voor het aansluiten van Europein FM receivers

5. Clip

- Voor het bevestigen van de Remote Mic + op kleding of aan een veiligheidskoord





6. LED's ingangsmodus

- Weergave geluidsbron

7. Knop ingangsmodus

- Voor het schakelen tussen geluidsbronnen

8. Aansluiting microUSB

ICOON	GELUIDSBRON
	Externe microfoon (zie pagina 14)
	Bluetooth telefoon en audio (zie pagina 15)
	Ringleiding (zie pagina 17)
	FM systeem (zie pagina 17)
	Lijningang (line-in) (zie pagina 17)

- Voor het opladen via de USB-naar-microUSB kabel
- Voor het afspelen van line-in audio via optionele kabel

9. Volumeknoppen

- Volume van de audio stream aanpassen

Tip: Het volume van de stream kan ook worden aangepast via de Thrive app, Starkey Hearing Technologies Remote en/of het bedieningselement van het hoortoestel. Bekijk de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel of neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de instellingen van uw systeem.

Basisfuncties


1. Druk voor het inschakelen van de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + gedurende 2 seconden op de multifunctionele knop en laat de knop weer los wanneer het LED-lampje groen oplicht.



1

2. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen ingeschakeld zijn.

- **Let op:** Voordat u de eerste keer audio kunt streamen, moeten uw hoortoestellen met de Remote Mic + worden gekoppeld. Bekijk voor meer informatie het hoofdstuk over **Koppelen met hoortoestellen** op pagina 11.

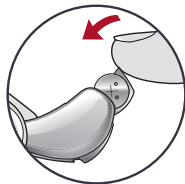


2

3. Om te beginnen met het streamen van audio:
 - Open de Thrive app en selecteer vanuit het scherm 'Accessories' de optie 'Start Streaming'.
 - Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 18.

4. Druk op de knop voor ingangsmodus en laat weer los om naar een andere geluidsbron te schakelen. Herhaal deze stap tot de gewenste ingang is geselecteerd.



4


5. Om audio vanaf een Bluetooth apparaat  te spelen, moet dit met de Remote Mic + zijn verbonden (weergegeven doordat de status-LED langzaam blauw pulseert).



- **Let op:** Voordat u de eerste keer audio via Bluetooth kunt streamen, moet het Bluetooth apparaat met de Remote Mic + worden gekoppeld. Bekijk voor meer informatie het hoofdstuk **Koppelen met Bluetooth apparaten** op pagina 13.



5

6. Druk op de + knop of de - knop voor het aanpassen van het volume van de stream. 



6

7. Om te stoppen met streamen, volgt u deze aanwijzingen:
- Schakel de Remote Mic + uit.
 - Open de Thrive app en selecteer vanuit het scherm 'Accessories' de optie 'Stop Streaming'.
 - Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 18.

Dagelijks gebruik

Inschakelen

Druk gedurende 2 seconden op de multifunctionele knop en laat de knop weer los wanneer het LED-lampje oplicht.



Uitschakelen

Druk gedurende 2 seconden op de multifunctionele knop en laat de knop weer los wanneer het LED-lampje dooft.



Batterij bijna leeg

LED pulseert langzaam rood. Er klinkt elke 5 minuten een hoorbaar signaal in de hoortoestellen.




Batterij opladen

Steek de microUSB stekker van de laadkabel in de microUSB aansluiting op de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone +.



Steek de USB stekker van de laadkabel in de vrouwelijke USB aansluiting op de meegeleverde stroomadapter.

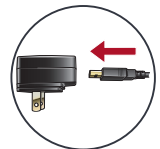


Oplaad status

Stand	Oplaad status	LED
Uit	Wordt opgeladen	Constant groen
Uit	Gereed	Uit
Aan	Wordt opgeladen	Constant groen wordt kort onderbroken door andere kleur/gedrag van status-LED
Aan	Gereed	Uit

Tip: Het opladen van de Remote Mic + duurt mogelijk langer tijdens het streamen van audio. Het opladen verloopt sneller wanneer de Remote Mic + uit staat.

Het dragen van de Remote Mic +

Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + kan op kleding worden bevestigd of aan een veiligheidskoord worden gedragen. Als de Remote Mic + als externe microfoon  wordt gebruikt of audio van een Bluetooth apparaat in telefoonmodus  streamt, moet de Remote Mic +

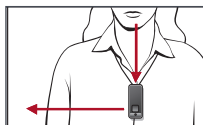

binnen 20 cm van de mond van de spreker worden geplaatst.

Clip – Druk op de clip zoals afgebeeld. Schuif de opening van de clip op het revers van de spreker en laat de clip los. Controleer of de Remote Mic + stevig op zijn plek zit.



Veiligheidskoord (optioneel) –

1. Druk op de clip zoals afgebeeld.
2. Plaats het lusje van het koord in de opening van de clip en til de lus op richting de bovenkant van de clip. Laat de clip los. Controleer of het veiligheidskoord stevig in de Remote Mic + is geplaatst.
3. Hang het veiligheidskoord om de hals.



Koppelen met hoortoestellen

Om interactie tussen Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + en uw hoortoestel(len) mogelijk te maken, moet u de Remote Mic + eerst met elk hoortoestel koppelen. Deze stap hoeft u slechts één keer uit te voeren, aangezien de apparaten elkaar hierna automatisch herkennen wanneer ze zijn ingeschakeld en zich binnen het draadloze bereik van elkaar bevinden.*

Om de Remote Mic + met uw hoortoestel(len) te koppelen:

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet met een ander Bluetooth apparaat zijn verbonden. Dit doet u door:
 - Bluetooth op uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 - Schakel andere accessoires in de buurt uit, bijvoorbeeld Starkey Hearing Technologies TV of Remote Mic +, indien u deze accessoires eerder met uw hoortoestellen heeft gekoppeld.
2. Schakel uw hoortoestellen uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
3. Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van de Remote Mic +.

**Standaard operationeel bereik is maximaal 10 meter. Deze reikwijdte is kleiner in geval van externe factoren zoals versperringen, storende signalen of de positionering van het menselijk lichaam. Het apparaat kan op een grotere afstand worden gebruikt, maar dit leidt mogelijk tot een lagere geluidskwaliteit en zwakkere verbinding.*

4. Druk tegelijkertijd op de knoppen ingangsmodus en volume omhoog (+) en houd ze gedurende 7 seconden ingedrukt tot de status-LED afwisselend blauw en rood knippert.



5. Voor **een set** hoortoestellen:

Eerste LED knippert	Tweede LED knippert	Resultaat koppeling	Volgende stap
1	2	Beide hoortoestellen gekoppeld	Gereed
1	2	Slechts één hoortoestel gekoppeld	Herhaal stap 1 – 5
1	n.v.t.	Geen hoortoestellen gekoppeld	Herhaal stap 1 – 5

6. Voor een **enkel** hoortoestel:

LED knippert	Resultaat koppeling	Volgende stap
1	Gelukt	Gereed
1	Niet gelukt	Herhaal stappen 1 – 4 en 6

Koppelen met Bluetooth apparaten

Om met de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + draadloze audio van uw Bluetooth apparaat te kunnen ontvangen, moet u de apparaten eerst koppelen.

1. Controleer of de Remote Mic + ingeschakeld is en niet via Bluetooth met een ander apparaat is verbonden (het groene LED-lampje pulseert langzaam).



2. Druk tegelijkertijd op de knoppen voor ingangsmodus en volume omlaag (-) en houd ze gedurende 7 seconden ingedrukt tot de status-LED snel blauw knippert.



3. Stel uw Bluetooth apparaat in op de koppelingsstand. Selecteer Remote Mic + zodra deze verschijnt.

- **Let op:** Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth apparaat voor verdere instructies.




4. De LED van de Remote Mic + geeft de volgende statussen voor koppeling weer:

- Gelukt – LED licht gedurende 2 seconden groen op
- Niet gelukt – LED licht gedurende 2 seconden rood op

Gebruik van de knop voor ingangsmodus

Huidige geluidsbron weergeven

Als de LED voor ingangsmodus uit staat, drukt u op de knop om de LED kort te laten oplichten.

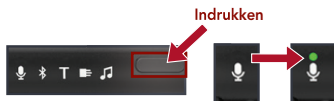

Naar andere geluidsbron schakelen

Terwijl de LED voor ingangsmodus oplicht, drukt u op de knop om naar de volgende beschikbare geluidsbron te schakelen.



Externe microfoon

Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + optimaliseert de microfooninstellingen automatisch op basis van de richting waarin u het accessoire plaatst.




Focus op één persoon wanneer er achtergrondgeluid aanwezig is

Als een spreker de Remote Mic + draagt, geeft het apparaat automatisch voorrang aan het geluid dat van bovenaf komt en dempt het geluid vanuit andere richtingen.



Luister naar meerdere naburige sprekers in een stille omgeving


Als u de microfoon horizontaal op de clip plaatst, vangt hij geluid uit alle richtingen op.

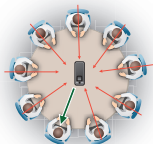

Bluetooth telefoon en audio

Telefoongesprekken voeren

(*handsfree profiel*) (A) U hoort het telefoongesprek in uw hoortoestellen. (B) Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + vangt uw stem op en zendt dit signaal naar de mobiele telefoon terug.

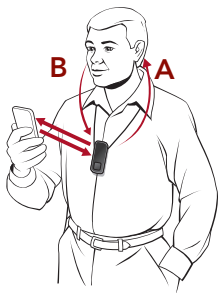

Muziek luisteren (*A2DP profiel*)

U hoort de gestreamde audio in uw hoortoestellen.



Algemene Bluetooth functionaliteit

Koppelen met Bluetooth apparaten	U kunt Remote Mic + met maximaal 8 Bluetooth apparaten koppelen.
Koppelen met Bluetooth apparaat	Wanneer beide apparaten ingeschakeld zijn en zich binnen het draadloze bereik van elkaar bevinden, zou de verbinding tussen de Remote Mic + en het gekoppelde Bluetooth apparaat <i>automatisch</i> tot stand moeten komen. De status LED pulseert dan langzaam blauw. Remote Mic + kan met maximaal 2 Bluetooth apparaten tegelijkertijd verbinding maken.
Muziek luisteren (of andere gestreamde audio)	Zet de ingangsmodus van de Remote Mic + op Bluetooth. Speel audio af op uw Bluetooth apparaat. Het geluid wordt automatisch naar uw hoortoestellen gestuurd.

Telefoon functionaliteit

Naar Bluetooth geluidsbron schakelen	Wanneer de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + een binnenkomend of uitgaand telefoongesprek detecteert, <i>schakelt het apparaat automatisch</i> naar Bluetooth als geluidsbron.	
Binnenkomende oproep aannemen	Druk kort op de multifunctionele knop wanneer u de ringtone in uw hoortoestellen hoort.	
Binnenkomende oproep weigeren	Houd de multifunctionele knop langer dan 2 seconden ingedrukt wanneer u de ringtone in uw hoortoestellen hoort. Laat de drukknop los nadat de ringtone is gestopt.	
Telefoongesprek beëindigen	Druk tijdens het telefoongesprek kort op de multifunctionele knop.	
Telefoongesprek van mobiele telefoon naar Remote Mic + sturen en vice versa	Druk tijdens het telefoongesprek op de multifunctionele knop en houd deze langer dan 2 seconden ingedrukt. Zo kunt u het gesprek op de telefoon zelf voeren. Druk nogmaals gedurende 2 seconden op de knop om het gesprek opnieuw naar de Remote Mic + te sturen.	
Een uitgaand telefoongesprek beginnen	Kies het telefoonnummer op uw Bluetooth toestel. Het telefoongesprek wordt automatisch naar uw hoortoestellen gestuurd.	


T Ringleiding (teleloop systeem)

Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + kan geluid van een systeem met ringleiding ontvangen (beschikbaar in sommige openbare gebouwen). Wanneer u de Remote Mic + daarbij in verticale positie draagt, levert dit de beste prestaties op. In deze modus verbreekt de Remote Mic + alle Bluetooth verbindingen. Wanneer u deze modus uitschakelt, probeert de Remote Mic + opnieuw een Bluetooth verbinding tot stand te brengen. Mogelijk moet deze verbinding handmatig worden ingeschakeld. *Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth apparaat voor verdere instructies.*




FM systeem

Wanneer er een *optionele* FM zender op de Europin connector is aangesloten, kan de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + audio ontvangen via een FM systeem. In deze modus kan de gebruiker de Remote Mic + dragen of de Remote Mic + op een stabiele ondergrond bij hem/haar in de buurt leggen.

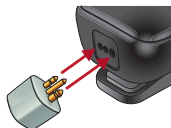


🎵 Lijningang (line-in)

Wanneer er een *optionele* line-in kabel op de USB connector is aangesloten, kan de Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + zonder Bluetooth verbinding audio binnenkrijgen via een mobiele telefoon, MP3-speler, tablet of computer. In deze modus legt de gebruiker de Remote Mic + doorgaans op een stabiele ondergrond bij hem/haar in de buurt.

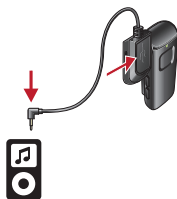

Audio-streaming starten/stoppen

Het streamen van audio via Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + kan op verschillende manieren worden begonnen of gestopt.

- **Schakel de Remote Mic + in:** Audio streamt automatisch naar het hoortoestel.
- **Thrive app:** Start de app op uw mobiele telefoon of tablet. Selecteer vanuit het scherm 'Accessories' de optie 'Start/Stop Streaming'.
- **Starkey Hearing Technologies Remote:** *Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u op de knop 'Favoriet' drukken.* 
- **Bedieningselement hoortoestel:** *Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u met een bepaalde handeling (bijv. het ingedrukt houden van een knop) het streamen starten/stoppen.*

Het streamen van audio stopt ook wanneer:


- Er geen binnenkomend audiosignaal wordt gedetecteerd terwijl de Bluetooth modus wel is ingeschakeld.
- De Remote Mic + uit staat.

U hoort een signaaltoon welke aangeeft dat het streamen van audio begint of stopt.

Stroomadapter in elkaar zetten


Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + kan worden geleverd met een aantal verschillende netstekkers die in diverse landen worden gebruikt. Wanneer de stroomadapter in elkaar moet worden gezet:

1. Kies de netstekker die in uw land wordt gebruikt.

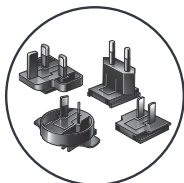


1

2. Schuif de stekker op de stroomadapter tot deze vast klikt.

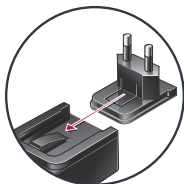

2

3. Om de stekker te verwijderen, drukt u op het lipje en schuift u de stekker van de kabel weg.

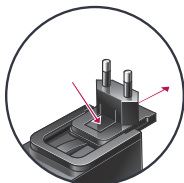

3

Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Een of beide hoortoestellen houdt onverwachts op met het streamen van audio.	Het hoortoestel bevindt zich mogelijk buiten het draadloze bereik.	Ga dichterbij de Remote Mic + zitten.
	Batterij van het hoortoestel is bijna leeg en levert onvoldoende stroom om audio te kunnen streamen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterij van het hoortoestel door een nieuwe. • Laad het hoortoestel op indien van toepassing.
	Grote objecten, zoals meubelstukken of een muur, kunnen het signaal blokkeren.	Voor een optimaal resultaat, dient de ruimte tussen uw hoortoestellen en de Remote Mic + vrij te zijn.
	De draadloze verbinding met Remote Mic + viel weg.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Audio-streaming starten/stoppen</i> om de audio stream opnieuw te starten.
De geluidskwaliteit van de stream klinkt vervormd.	Batterij van de Remote Mic + is bijna leeg.	Laad de Remote Mic + op.
	Volume van geluidsbron is niet optimaal.	Pas het volume van de geluidsbron aan tot de geluidskwaliteit beter klinkt.
De geluidskwaliteit van de stream is wisselvallig.	<u>Bluetooth modus:</u> Bluetooth apparaat bevindt zich mogelijk aan de rand van het draadloze bereik.	Plaats het Bluetooth apparaat dichterbij de Remote Mic +.
	<u>Ringleiding modus:</u> Remote Mic + staat mogelijk niet in de ideale positie voor streaming met optimale kwaliteit.	Plaats de Remote Mic + verticaal.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Audio stream klinkt te luid of te zacht.	Volume waarop de Remote Mic + geluid naar het hoortoestel stuurt, is niet optimaal.	Gebruik de knoppen Volume + of Volume – op de Remote Mic +.
	Volume van geluidsbron is niet optimaal.	Pas het volume van de geluidsbron aan tot de geluidskwaliteit beter klinkt.
<u>Externe microfoon modus:</u> Spreker is moeilijk te verstaan in een rumoerige omgeving.	Remote Mic + is mogelijk te ver van de spreker vandaan geplaatst.	Plaats de Remote Mic + dichterbij de mond van de spreker.
	Remote Mic + wordt mogelijk door kleding afgedekt of is niet optimaal geplaatst.	Zorg ervoor dat de ruimte tussen de Remote Mic + en de stem van de spreker geheel vrij is.
<u>Bluetooth modus:</u> Beller hoort uw stem niet tijdens een telefoongesprek.	Remote Mic + bevindt zich mogelijk te ver van uw mond vandaan.	Plaats de Remote Mic + dichterbij uw mond of spreek luider.
<u>Ringleiding modus:</u> Telefoongesprekken zijn niet hoorbaar in de hoortoestellen.	In ringleiding modus worden Bluetooth verbindingen met mobiele telefoons uitgeschakeld.	Schakel naar een andere geluidsbron. Breng, indien nodig, de Bluetooth verbinding opnieuw tot stand.
LED pulseert langzaam groen of blauw, maar er is via de hoortoestellen geen geluid hoorbaar.	Hoortoestellen zijn niet gereed voor het ontvangen van een audio stream.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Audio-streaming starten/stoppen</i> om de audio stream te starten.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
LED pulseert langzaam groen of blauw, maar er is via de hoortoestellen geen geluid hoorbaar.	Hoortoestellen en Remote Mic + zijn niet gekoppeld.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Koppelen met hoortoestellen</i> .
	Er is geen binnenkomend audiosignaal beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de elektronische geluidsbron in. • Schakel de mute/stil stand van de elektronische geluidsbron uit of verhoog het volume. • Controleer of er een ringleiding of FM systeem beschikbaar is.
LED gloeit constant rood.	Mogelijk is er een fout opgetreden.	Schakel de Remote Mic + uit, wacht 30 seconden, schakel het apparaat opnieuw in.
LED voor ingangsmodus knippert snel.	Er ontbreekt iets voor de huidige geluidsbron.	Bevestig de line-in kabel, sluit een FM receiver aan, of breng uw Bluetooth verbinding opnieuw tot stand.
LED voor ingangsmodus licht niet op.	LED voor ingangsmodus staat uit om batterij te besparen.	Druk op de knop voor ingangsmodus om de LED op te laten lichten.
Gewenste ingangsmodus niet beschikbaar.	Er ontbreekt iets voor de gewenste ingang.	Bevestig de line-in kabel, sluit een FM receiver aan, of breng uw Bluetooth verbinding opnieuw tot stand.

Koppeling met meer dan één Bluetooth apparaat lukt niet.	Er is al een Bluetooth verbinding actief op de Remote Mic +.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Koppelen met Bluetooth apparaten</i> .
Audio van TV (optioneel product) valt onverwachts weg terwijl de LED op de Remote Mic + langzaam blauw pulseert.	Audio van bepaalde Bluetooth apparaten krijgt voorrang boven het geluid van de TV streamer.	Schakel de Remote Mic + naar een andere modus dan Bluetooth.

Veiligheidsinstructies

De Starkey Hearing Technologies Remote Microphone + is volledig conform Internationale Electromagnetische standaarden ontwikkeld. Ondanks alles bestaat de mogelijkheid van interferentie met hoogspanningsleidingen, metaaldetectoren, electromagnetische velden en andere hulpmiddelen en radiosignalen.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplanteerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten. Indien u een MRI- of MRT-Behandlung moet ondergaan, raden wij u dringend af de SurfLink externe microfoon te gebruiken.

Gebruik voor in het vliegtuig

De Remote Mic + mag niet gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt toegestaan

Internationaal gebruik

Uw Remote Mic + en draadloze overdracht zijn specifiek voor een land waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in de microfoon zelf. De oplaadbare batterij is niet verwisselbaar. Probeer u alstublieft niet de batterij uit te nemen of te verwisselen.

FCC/IC Informatie

FCC ID: EOA-CM

IC: 6903A-CM (Model 400)

FCC Aanwijzing

Het toestel komt overeen met Deel 15 van de FCCRegulering en met RSS-210. Deze houden de volgende condities in: (1) Het toestel veroorzaakt geen zware interferenties en (2) het toestel moet interferenties afzwakken of beëindigen, ook wanneer dat leidt tot tijdelijke onbruikbaarheid.

Belangrijk: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor optredende onderbrekingen door radio of TV signalen, die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat optreden.

De Remote Mic + is ontwikkeld onder toezicht van de geldende richtlijnen en correspondeert met de Directive 1999/5/EC. Op onderstaand adres is een kopie van Declaration of Conformity beschikbaar.

Paradigm, Inc.

6600 Washington Ave. South

Eden Prairie, MN USA

Paradigm, Inc. European Headquarters

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park

Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX

United Kingdom



Fabrikant

Starkey Laboratories
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

www.starkey.nl
www.starkey.be

Starkey Nederland en België

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl

