

Table Microphone

GEBRUIKSAANWIJZING



Overzicht	2
LED-signalen	8
Basisfuncties	12
Koppelen	13
Dagelijks gebruik	16
Dragen van de Table Microphone	21
Stroomadapter in elkaar zetten	22
Bedrade oordopjes	23
Problemen oplossen	25
Veiligheidsinstructies	27
Wettelijke aanwijzingen	30

Overzicht

De Starkey Table Microphone is een luisterhulp en apparaat om televisiegeluid te streamen. Het stuurt de audio direct naar uw 2,4 GHz draadloze hoortoestellen.


Belangrijkste gebruikswijzen:

- Tafelmicrofoon – streamen van stemgeluid vanuit een bepaalde richting via de volgende instellingen:
 - o Automatisch
 - o Handmatig
 - Enkele richting
 - Twee richtingen
 - o Surround
- Externe microfoon – streamen van het stemgeluid van de persoon die het apparaat draagt
- TV streamer – streamen van audio via lijningang microUSB


Streaming – Audio of geluid wordt draadloos vanaf de Table Microphone naar uw hoortoestellen overgedragen.

Inhoud van de verpakking

- Table Microphone
- Stroomadapter & USB naar microUSB kabel
- Stekkers voor vier gebieden:
 - o Verenigde Staten
 - o Europa
 - o Australië
 - o Verenigd Koninkrijk
- Gebruiksaanwijzing
- Etui
- Bedrade oordopjes met flexibele dopjes & oorhaak
- Kabel voor streamen van tv-geluid
- Hanger met veiligheidskoord
- Siliconen beschermhoes

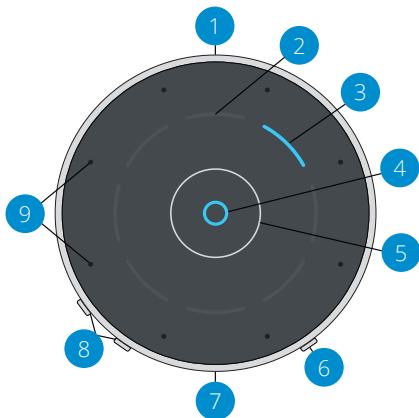

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Aansluiting microUSB | 6. Aan/uit-knop |
| 2. Directionele touchbediening | 7. 3,5 mm jackplug |
| 3. Segmenten | 8. Volume +/- knoppen |
| 4. Indicator automatische instelling | 9. Microfoons |
| 5. Schakelknop voor instellingen | |

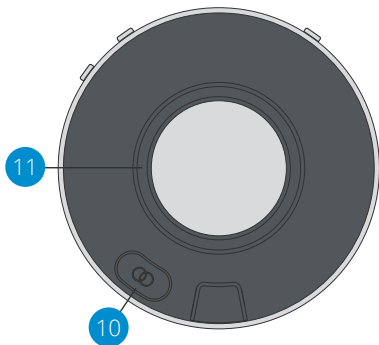

- 10.** Knop voor koppelen met hoortoestellen
- 11.** Magnetische aansluiting voor hanger

1. Aansluiting microUSB

- Oplaadbaar via de USB naar microUSB kabel
- Streamt audio via de kabel voor het streamen van televisiegeluid

2. Touchbediening

- Handmatig selecteren van één of twee richtingen

3. Segmenten:

- Geeft de geselecteerde richting(en) aan
- LED-signalen, tonen:
 - o Status bij opladen
 - o Aan/uit stand
 - o Status accu
 - o Status bij koppelen
 - o Volume
 - o Verbinding lijnin-/uitgang

4. LED-sigitaal automatische instelling

- Aan betekent dat de automatische instelling actief is
- Uit betekent surround of handmatige instelling

5. Schakelknop voor instellingen

- Schakelt tussen automatische en surround instellingen

6. Aan/uit-knop

- Indrukken om aan/uit te zetten

7. 3,5 mm jackplug

- Voor het aansluiten van oordopjes met kabel

8. Volume +/- knoppen

- Volume van de audio stream aanpassen

9. Microfoons

- Vangen de stem van spreker(s) op

10. Knop voor koppelen met hoortoestellen

- Koppelt en verbindt met hoortoestel(len)


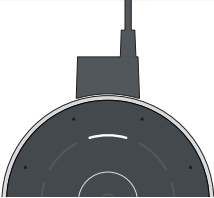
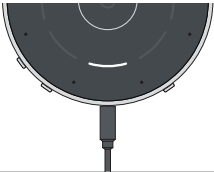


11. Magnetische aansluiting voor hanger

- Voor gebruik als externe microfoon




LED-signalen

Gebruikssignalen

 A top-down view of a circular device with a USB cable plugged into the top. The device's surface is dark with concentric white circles. Several green LED segments are illuminated: one on the left side and two on the right side, forming a partial ring.	<p>Status bij opladen</p> <p>Groene segmenten geven het laadniveau aan. Elk segment staat voor circa 1 uur accuduur. Het segment dat groen knippert geeft het huidige niveau aan.</p> <p>Wanneer er tijdens gebruik wordt opgeladen, worden andere signalen kort onderbroken doordat alle segmenten groen oplichten zodra de accu volledig is opgeladen.</p>
 A top-down view of the circular device showing two orange LED segments illuminated on the right side.	<p>Oranje segmenten wijzen op minder dan 2 uur accuduur.</p>
 A top-down view of the circular device showing a single red LED segment illuminated at the top.	<p>Rood segment wijst op minder dan 1 uur accuduur.</p> <p>Rood knipperend segment wijst op lege accu.</p>

	<p>Plaatsing product</p> <p>Voor een optimaal resultaat, zorgt u ervoor dat de volume en aan/uit knoppen richting uzelf wijzen.</p>
	<p>Lijningang (line-in)</p> <p>Bovenste segment wit wijst op verbinding van de lijningang (bijv. tv-geluid).</p>
	<p>Lijnuitgang (line-out)</p> <p>Onderste segment knippert wit bij verbinding van de lijnuitgang (oordopjes).</p>
	<p>Volume +</p> <p>Bovenste segment knippert wit wanneer het volume wordt verhoogd.</p>
	<p>Volume -</p> <p>Onderste segment knippert wit wanneer het volume wordt verlaagd.</p>

LED-signalen bij koppelen met hoortoestel

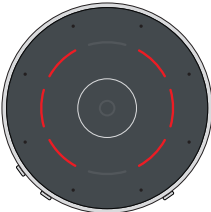	Blauw knipperende haakjes	Hoortoestellen worden gezocht.
	Constant groene haakjes	Hoortoestel succesvol gekoppeld.
	Constant rode haakjes	Hoortoestel koppelen mislukt.

Zie "Koppelen" op pagina 13 voor meer informatie over het koppelen van monaurale of binaurale hoortoestellen.

LED-signalen bij het streamen van gesprekken

	<p>Automatisch</p> <p>Signaal automatische instelling: (O) constant blauw.</p> <p>Blauw segment geeft de actieve luisterrichting weer.</p>
	<p>Handmatig enkel/dubbel</p> <p>Eén of twee blauw(e) segment(en) geeft de geselecteerde luisterrichting(en) weer.</p>
	<p>Surround</p> <p>Wanneer alle segmenten blauw oplichten, wordt er in alle richtingen geluisterd.</p>

Basisfuncties

1. Druk op de aan/uit-knop om de Table Microphone in te schakelen.
2. De groene segmenten geven het laadniveau van de accu weer.
3. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen ingeschakeld zijn.

Let op: Voordat u de eerste keer audio kunt streamen, moeten uw hoortoestellen met de Table Microphone worden gekoppeld. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk **Koppelen** op pagina 13.




4. Om met het streamen van audio te beginnen, opent u de Thrive app en selecteert u vanuit het scherm 'Accessoires' de optie 'Start Streaming'.

Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk

Audio-streaming starten /stoppen op pagina 20.

5. Druk op de + knop of de - knop om het volume van de stream aan te passen.
6. Schakel de Table Microphone uit om het streamen te stoppen.

Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 20.

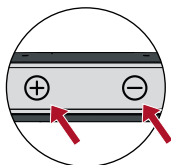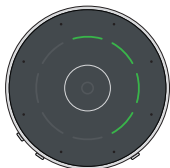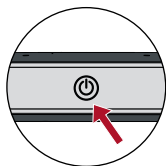

Koppelen

Om interactie tussen de Table Microphone en uw hoortoestellen mogelijk te maken, moet u deze eerst met elk hoortoestel koppelen. Deze stap hoeft u slechts één keer uit te voeren, aangezien de Table Microphone en uw hoortoestellen elkaar hierna automatisch herkennen wanneer ze zijn ingeschakeld en zich binnen het draadloze bereik van elkaar bevinden.*


Om de Table Microphone met uw hoortoestellen te koppelen:

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet met een ander Bluetooth® apparaat zijn verbonden. Dit doet u als volgt:
 - Schakel Bluetooth uit op uw mobiele telefoon.
 - Schakel andere accessoires in de buurt uit, bijvoorbeeld de Starkey Hearing Technologies accessoires TV of Remote Microphone +, indien u deze accessoires eerder met uw hoortoestellen heeft gekoppeld.
 - Schakel uw hoortoestellen uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.


Let op: Voor een systeem met CROS hoortoestel, moet u zowel het hoortoestel als de CROS zender uitschakelen. Schakel alleen het hoortoestel opnieuw in en zorg ervoor dat de CROS zender uit blijft staan.

*Standaard operationeel bereik is maximaal 10 meter. Deze reikwijdte is kleiner in geval van externe factoren zoals versperringen, storende signalen of de positionering van het lichaam. Grotere afstanden kunnen tot mogelijk een lagere geluidskwaliteit en zwakkere verbinding leiden.

2. Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van de Table Microphone.

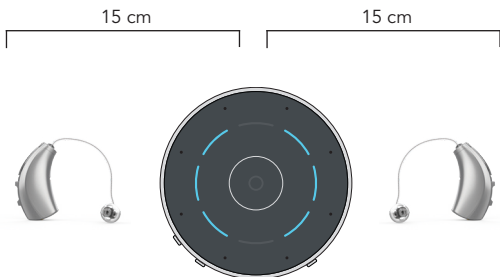

3. Druk de knop voor het koppelen van hoortoestellen 2 seconden lang in en plaats de Table Microphone met de bovenkant omhoog op een vlakke ondergrond. De knipperende 'haakjes' geven aan dat het apparaat gereed is voor het koppelen via Bluetooth.

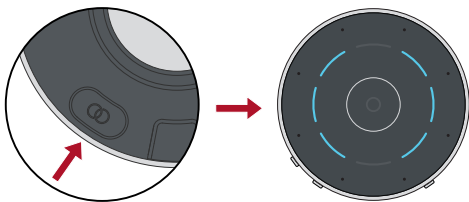

4. Voor een set hoortoestellen:

Haakje links	Haakje rechts	Resultaat koppeling	Volgende stap
()	Beide hoortoestellen gekoppeld.	Klaar
()	Alleen linker hoortoestel gekoppeld.	Herhaal stap 1 – 3
()	Alleen rechter hoortoestel gekoppeld.	Herhaal stap 1 – 3
()	Geen hoortoestellen gekoppeld.	Herhaal stap 1 – 3

5. Voor een enkel hoortoestel:

Haakje links	Haakje rechts	Resultaat koppeling	Volgende stap
(Linker hoortoestel gekoppeld.	Klaar
)	Rechter hoortoestel gekoppeld.	Klaar
(Linker hoortoestel niet gekoppeld.	Herhaal stap 1 – 3
)	Rechter hoortoestel niet gekoppeld.	Herhaal stap 1 – 3


Dagelijks gebruik

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt en laat de knop weer los.

Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt. De groene lampjes geven het laadniveau van de accu weer en het product wordt uitgeschakeld.

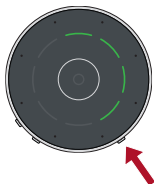



Accu laag

De actieve richtingindicatoren lichten rood op. Ook klinkt elke 15 minuten een piepsignaal in de hoortoestellen.



Batterij opladen

Steek de microUSB stekker van de laadkabel in de microUSB aansluiting op de Table Microphone. Steek de USB stekker van de laadkabel in de USB aansluiting op de stroomadapter. Met een volledig opgeladen accu kan de Table Microphone tot 12 uur lang audio streamen. Het volledig opladen van het apparaat duurt ongeveer 2 uur.

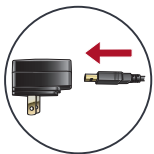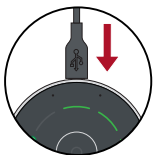


Instellingen voor het streamen van gesprekken

De Table Microphone is een veelzijdig, intelligent product. In een stille of juist drukke omgeving, volgt hij de belangrijkste spreker automatisch om u een optimaal spraakverstaan te bieden. U kunt de automatische modus van de Table Microphone uitschakelen en handmatig één of twee sprekers uit de groep selecteren. De modus 'surround' is geoptimaliseerd voor een groot groepsgesprek in een stille omgeving. Daarnaast kan de Table Microphone in een drukke omgeving worden gedragen door een spreker die zich verder weg bevindt.

Tafelmicrofoon

Plaats uw Table Microphone in het midden van de tafel om naar een groep mensen te luisteren. Voor een optimaal spraakverstaan, zet u de Table Microphone altijd zo dicht mogelijk bij uw gesprekspartner(s).
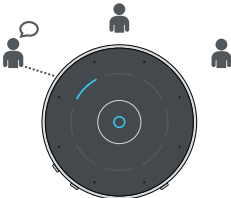
<h4 data-bbox="222 889 391 914">Automatisch</h4>  <td data-bbox="484 869 905 1410"><p data-bbox="497 889 875 1043">Wanneer het led-lampje voor automatische modus oplicht, volgt de Table Microphone de belangrijkste spreker automatisch.</p><p data-bbox="497 1065 875 1254">Als het lampje voor automatische modus uitstaat, kunt u de touchbediening voor automatisch/surround aantikken om deze instelling te activeren.</p></td>	<p data-bbox="497 889 875 1043">Wanneer het led-lampje voor automatische modus oplicht, volgt de Table Microphone de belangrijkste spreker automatisch.</p> <p data-bbox="497 1065 875 1254">Als het lampje voor automatische modus uitstaat, kunt u de touchbediening voor automatisch/surround aantikken om deze instelling te activeren.</p>
--	---

<p>Handmatig voor één spreker</p> 	<p>Tik op het gewenste segment om op een specifieke spreker te richten.</p>
<p>Handmatig voor twee sprekers</p> 	<p>Tik een tweede segment aan en houdt deze 1 seconde ingedrukt om op een tweede spreker te richten.</p>
<p>Surround</p> 	<p>Tik op de touchbediening voor automatisch/surround om in een rustige omgeving naar meerdere mensen te luisteren.</p> <p>Tik op de touchbediening voor automatisch/surround om naar de automatische instellingen terug te schakelen.</p>

TV audio streamen (lijningang)

Stream audio van uw tv direct naar uw hoortoestellen.

 <p>Audioplug</p>	<p>Sluit de kabel voor het streamen van televisiegeluid aan op de microUSB aansluiting van de Table Microphone.</p> <p>Steek de 3,5 mm audioplug in de audioaansluiting op de tv.</p>
 <p>USB stekker</p> <p>Audioplug</p> <p>microUSB stekker</p>	<p>Om de Table Microphone op te laden tijdens het streamen van televisiegeluid, steekt u de microUSB stekker van de oplaadkabel in de microUSB aansluiting op de kabel voor het streamen van televisiegeluid.</p> <p>Steek vervolgens de USB stekker van de oplaadkabel in de aansluiting voor stroomvoorziening.</p> <p>Steek de netstekker van de stroomadapter in het stopcontact.</p>

Audio-streaming starten/stoppen

Het streamen van audio met de Table Microphone kan op verschillende manieren worden begonnen of gestopt:


- **Schakel de Table Microphone in:** Audio streamt automatisch naar het hoortoestel.
- **Starkey Hearing Technologies Remote:** Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u op de knop 'Favoriet' drukken.
- **Bedieningselement hoortoestel:** Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u met een bepaalde handeling (bijv. het lang indrukken van een knop) het streamen starten/stoppen.

Het streamen van audio stopt ook wanneer de Table Microphone wordt uitgeschakeld.

U hoort een signaaltoon in uw hoortoestel welke aangeeft dat het streamen van audio begint of stopt.


Dragen van de Table Microphone

De Table Microphone kan met een veiligheidskoord om de hals worden gedragen. De microfoon moet binnen 20 cm van de mond van de spreker worden geplaatst.

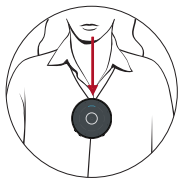


Veiligheidskoord


- Bevestig de magnetische hanger aan de achterkant van de Table Microphone. Zorg ervoor dat de hanger correct wordt ingestoken en stevig vast zit.

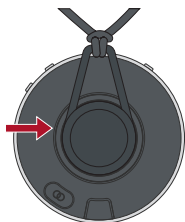

- Hang het veiligheidskoord om de hals. Om de lengte te verstellen, houdt u de cilinder vast en trekt u aan de sluiting.

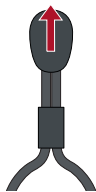


- Wanneer de Table Microphone door een spreker wordt gedragen, licht de bovenste led-indicator gedurende 3 seconden op.

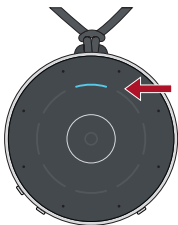


Stroomadapter in elkaar zetten

De Table Microphone kan worden geleverd met een aantal verschillende netstekkers die in diverse landen worden gebruikt. Zo zet u de stroomadapter in elkaar:


1. Kies de netstekker die in uw land wordt gebruikt.

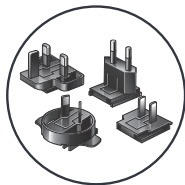


2. Schuif de stekker op de stroomadapter tot deze vast klikt.

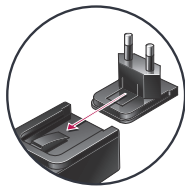

3. Om de stekker te verwijderen, drukt u op het lipje en schuift u de stekker van de kabel weg.

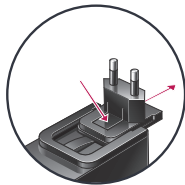

Bedrade oordopjes

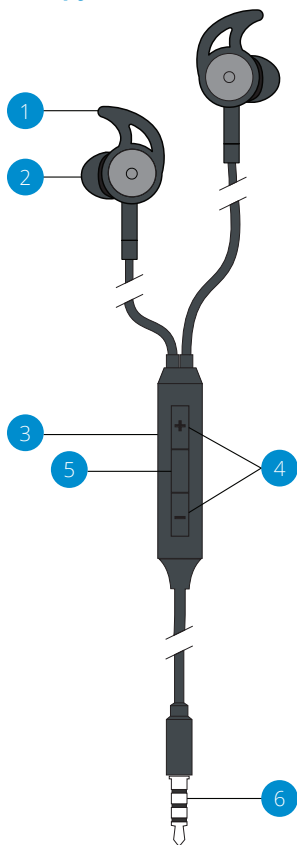

- 1. Oorhaken (klein/medium/groot)**
 - Optioneel voor optimale, persoonlijke pasvorm
- 2. Flexibele dopjes (klein/medium/groot)**
 - Voor persoonlijke pasvorm
- 3. Bediening op snoer**
 - Snelle toegang tot belangrijkste functies
- 4. Volume +/-**
 - Volume van gespreksgeluid aanpassen
- 5. Schakelknop voor instellingen**
 - Schakelt tussen de automatische en surround instellingen
- 6. 3,5 mm audioplug**

Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Een of beide hoortoestellen houdt onverwachts op met het streamen van audio.	Het hoortoestel bevindt zich mogelijk buiten het draadloze bereik.	Ga dichterbij de Table Microphone zitten.
	Batterij van het hoortoestel is bijna leeg en levert onvoldoende stroom om audio te kunnen streamen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterij van het hoortoestel door een nieuwe. • Laad het hoortoestel op indien van toepassing.
	Grote objecten, zoals meubelstukken of een muur, kunnen het signaal blokkeren.	Voor een optimaal resultaat, dient de ruimte tussen uw hoortoestellen en de Table Microphone vrij te zijn.
	De draadloze verbinding met de Table Microphone viel weg.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Audio-streaming starten/stoppen</i> om de audio stream opnieuw te starten.
De geluidskwaliteit van de stream klinkt vervormd.	Accu van de Table Microphone is bijna leeg.	Laad de Table Microphone op.
	Volume van geluidsbron is niet optimaal.	Pas het volume van de geluidsbron aan tot de geluidskwaliteit beter klinkt.
De geluidskwaliteit van de stream is wisselvallig.	Bluetooth apparaat bevindt zich mogelijk aan de rand van het draadloze bereik.	Plaats het Bluetooth apparaat dichterbij de Table Microphone.
Audio stream klinkt te luid of te zacht.	Volume waarop de Table Microphone geluid naar het hoortoestel overdraagt, is niet optimaal.	Gebruik de knoppen Volume + of Volume – op de Table Microphone.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
<u>Bij gebruik als tafel-microfoon:</u> Spreker is moeilijk te verstaan in een rumoerige omgeving.	Table Microphone is mogelijk te ver van de spreker vandaan geplaatst.	Plaats de Table Microphone dichterbij de mond van de spreker.
<u>Bij gebruik als externe microfoon:</u> Spreker is moeilijk te verstaan in een rumoerige omgeving.	Table Microphone wordt mogelijk door kleding afgedekt of is niet optimaal gericht.	Zorg ervoor dat de ruimte tussen de Table Microphone en de stem van de spreker geheel vrij is.
Gesprek/audio stream is niet hoorbaar via de hoortoestellen.	Hoortoestellen en Table Microphone zijn niet gekoppeld.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Koppelen</i> .
	Er is geen binnenkomend audiosignaal beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de elektronische geluidsbron in. • Schakel de mute/stil stand van de elektronische geluidsbron uit of verhoog het volume.
Apparaat reageert niet.	Mogelijk is er een fout opgetreden.	Houd de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Schakel het apparaat weer in.

Veiligheidsinstructies

De Table Microphone is volledig conform Internationale Elektromagnetische standaarden ontwikkeld. Ondanks alles bestaat de mogelijkheid van interferentie met hoogspanningsleidingen, metaaldetectoren, elektromagnetische velden en andere hulpmiddelen en radiosignalen.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantemd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten. Indien u een MRI- of MRT- behandeling moet ondergaan, raden wij u dringend af de Table Microphone te gebruiken.

Gebruik voor in het vliegtuig

De Table Microphone mag niet gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Internationaal gebruik

Uw Table Microphone en draadloze overdracht zijn specifiek voor een land waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in de microfoon zelf. De oplaadbare batterij is niet verwisselbaar. Probeer u alstublieft niet de batterij uit te nemen of te verwisselen.

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10

FCC Aanwijzing

Het toestel komt overeen met Deel 15 van de FCC Regulering en met RSS-210. Deze houden de volgende condities in: (1) Het toestel veroorzaakt geen zware interferenties en (2) het toestel moet interferenties afzwakken of beëindigen, ook wanneer dat leidt tot tijdelijke onbruikbaarheid.

Belangrijk: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor optredende onderbrekingen door radio of TV signalen, die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat optreden.

De Table Microphone is ontwikkeld onder toezicht van de geldende richtlijnen en correspondeert met de Directive 014/53/EU.. Op onderstaand adres is een kopie van Declaration of Conformity beschikbaar.

Paradigm, Inc.

6600 Washington Ave. South

Eden Prairie, MN USA

Paradigm, Inc. European Headquarters

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park

Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX

United Kingdom



Fabrikant

Starkey Laboratories
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

www.starkey.nl
www.starkey.be

Starkey Nederland en België

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl



Bluetooth® als woord en als logo is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Starkey verloopt onder licentie.

Starkey en Thrive zijn geregistreerde handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.
© 2020 Starkey. All rechten voorbehouden.

86334-007 12/19 BKLT3072-00-EE-SG

3006 EN V14